



KOD KATALOGOWY	FIX-KD-13
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-13
CODE	FIX-KD-13
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-13

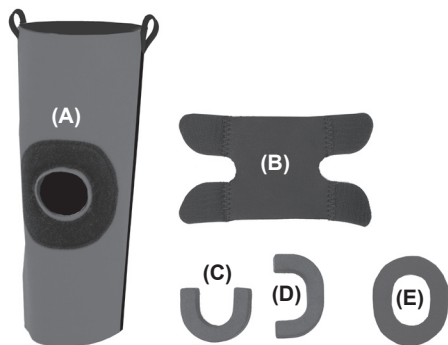

- (A) Orteza / Brace
 (B) Osłona kolana / Knee protection
 (C) Stabilizator podrzępkowy / Patellar stabilizer
 (D) Stabilizator boczny rzepki / Patellar side stabilizer
 (E) Stabilizator rzepki / Patellar stabilizer




- 1. PL:** Załóż ortezę na nogę i za pomocą uchwytów podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzępkowym (1).

EN: Place the brace on the leg and using the grip handles, pull it up to keep the kneecap in the patellar hole (1).

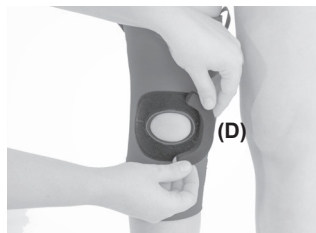

- 2. PL:** Przypnij wybrany element stabilizujący rzepkę w określonej pozycji.

EN: Attach the selected patellar element in the required place.

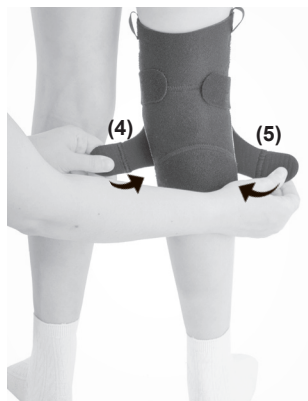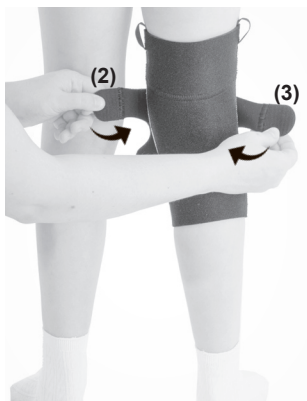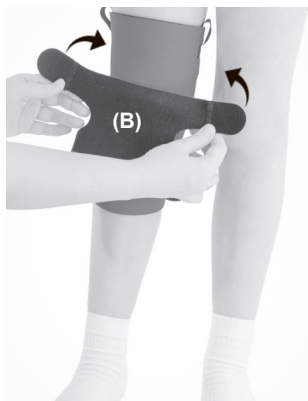

- 3. PL:** Przypnij osłonę kolana (B) do tylnej części ortezy na rzepy (2,3,4,5).
EN: Attach the knee protector (B) to the back of the Velcro brace (2,3,4,5).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.